

## Травматология 10

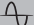

15 МИН



- КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
- КОЛЕННЫЙ ОСТЕОАРТРИТ\*


## ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Боковые зоны сустава	5 Гц, 50 Гц, затем переменная настройка (V)	1 мин на точку для каждой частоты
2	Зона над коленной чашечкой		
3	Зона под коленной чашечкой		
4	Подколенная впадина		

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы с трехнедельными перерывами между ними до полного выздоровления. Повторите процедуру через **6 месяцев**, если будет необходимо.

 Для **остеоартрита** в колене также выполняйте процедуру **“Общая 3 (кровь)”** вместе с данной процедурой.

