



Гинекология 2


- 🔴 НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
- 🔴 ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ – аномальное размножение клеток.
- 🔴 КИСТЫ ЯИЧНИКОВ
- 🔴 НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ БЕСПЛОДИЯ

ЛЕЧЕНИЕ:

Используйте **медицинскую** насадку, а также **зондовую** насадку с **обычной** оболочкой.

ДЕНЬ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА	ВРЕМЯ
1 (21 мин.)	1 Проекция влагалища	5 Гц	5 мин
	2 Придатки	5 Гц	на точку
	7 Как показано	50 Гц	2 мин
	8 Как показано	50 Гц	на точку
2 (21 мин.)	1 Проекция влагалища	5 Гц	5 мин
	3 Бедренные артерии	5 Гц	на точку
	7 Как показано	50 Гц	2 мин
	8 Как показано	50 Гц	на точку
3 (21 мин.)	1 Проекция влагалища	50 Гц	5 мин
	2 Придатки	50 Гц	на точку
	7 Как показано	50 Гц	2 мин
	8 Как показано	50 Гц	на точку
4 (21 мин.)	1 Проекция влагалища	5 Гц	5 мин
	3 Бедренные артерии	5 Гц	на точку
	7 Как показано	50 Гц	2 мин
	8 Как показано	50 Гц	на точку
5 (20 мин.)	2 Придатки	50 Гц	5 мин на точку
	4 Промежность	50 Гц	
	5 Зондовая насадка помещена во влагалище (обычная оболочка)	1000 Гц	
	7 Как показано	50 Гц	2 мин на точку
	8 Как показано	50 Гц	

Продолжение на следующей странице

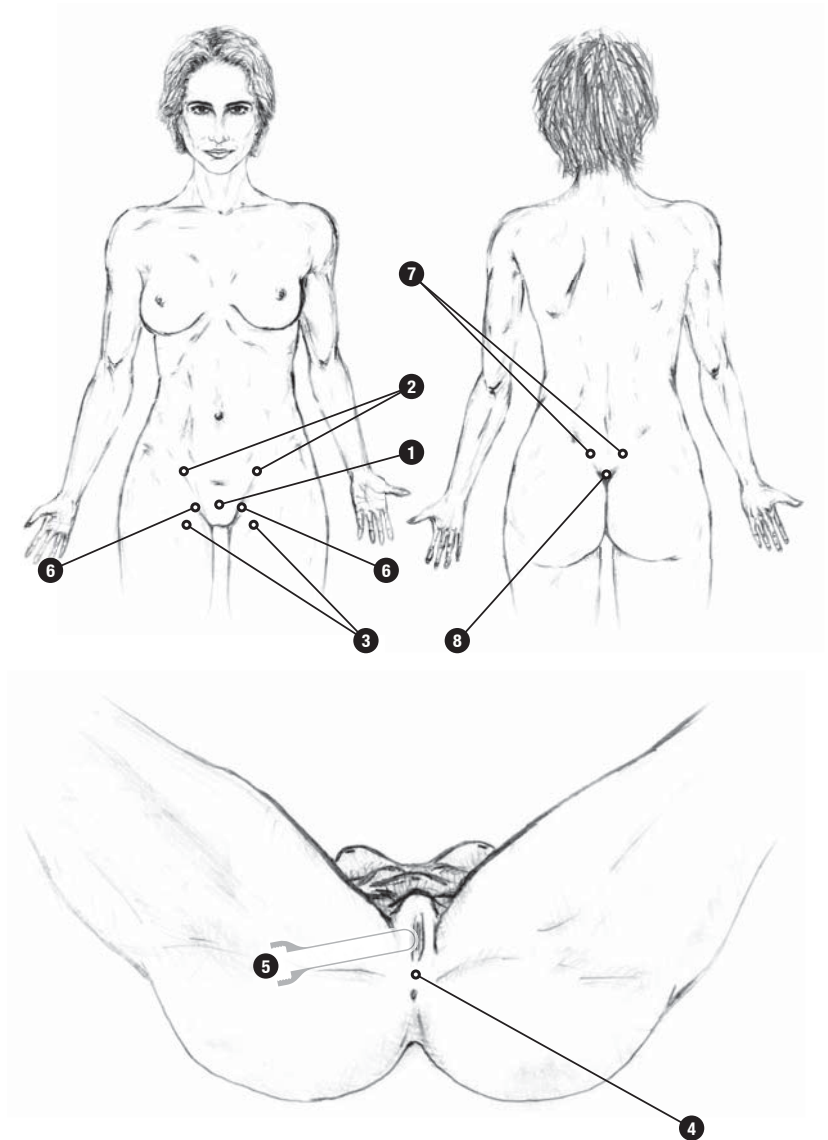

ДЕНЬ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА Гц	ВРЕМЯ мин
6 (28 мин)	1 Проекция влагалища 6 Наружное паховое кольцо 5 Зондовая насадка помещена во влагалище (обычная оболочка)	5 Гц 5 Гц 1000 Гц	5 мин на точку
	7 Как показано 8 Как показано	50 Гц 50 Гц	2 мин на точку
7 (28 мин)	1 Проекция влагалища 6 Наружное паховое кольцо 5 Зондовая насадка помещена во влагалище (обычная оболочка)	50 Гц 50 Гц 1000 Гц	5 мин на точку
	7 Как показано 8 Как показано	50 Гц 50 Гц	2 мин на точку
8 (28 мин)	1 Проекция влагалища 3 Бедренные артерии 5 Зондовая насадка помещена во влагалище (обычная оболочка)	5 Гц 5 Гц 1000 Гц	5 мин на точку
	7 Как показано 8 Как показано	50 Гц 50 Гц	2 мин на точку
9 (28 мин)	2 Придатки 4 Промежность 5 Зондовая насадка помещена во влагалище (обычная оболочка)	50 Гц 50 Гц 1000 Гц	5 мин на точку
	7 Как показано 8 Как показано	50 Гц 50 Гц	2 мин на точку
10 (28 мин)	1 Проекция влагалища 2 Придатки 5 Зондовая насадка помещена во влагалище (обычная оболочка)	50 Гц 50 Гц 1000 Гц	5 мин на точку
	7 Как показано 8 Как показано	50 Гц 50 Гц	2 мин на точку

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Как описано выше. После этого перерыв на 4 недели, затем следующий курс, если будет необходимо.

